

ダニアレルゲン Der f 1 不活化効果 簡易評価キット

NEW


「ITEA ダニアレルゲン(Der f 1)不活化効果 簡易評価キット」は、**開発段階における試作品のアレルゲン不活化効果のスクリーニング**など、**精確性よりも迅速性**が重視される局面において使用可能な簡易的な評価系です。最小限の道具と簡単な操作、わずか30分以内で結果を判定することが可能です。
【本品は試験販売品です】

製品コード	製品名	包装	価格¥(税抜)
20001	ITEA ダニアレルゲン (Der f 1) 不活化効果 簡易評価キット	4 テスト分	36,000

- ◆キット内容*1
- | | | |
|---------------------------------|----|-------|
| (A) 抽出物溶解液 | 1本 | 反応セット |
| (B) スポイト 抽出物溶解用 | 4本 | |
| (C) ダニ (Der f 1) 抽出物 | 4本 | |
| ITEA ダニアレルゲン (Der 1) 1μg/カラムテスト | 4袋 | |
| (D) スポイト 展開液添加用 | 4本 | 展開セット |
| (E) 展開液 | 4本 | |
| (F) スポイト サンプル滴下用 | 4本 | |



- 操作が簡単!** 専用機器や技術は不要。下記の手順で検体の評価ができます。
- 判定時間 30分以内!** サンプル滴下後、わずか30分以内で結果が判定できます。
- 複数検体を短時間で処理可能!** 短時間で複数検体の処理が可能です。1キットで3種の検体の判定*2ができます。

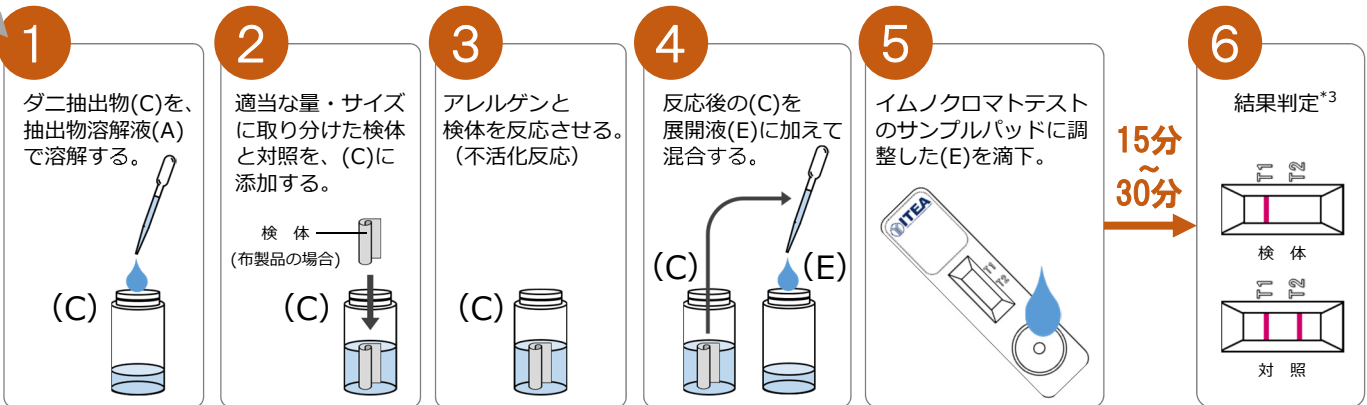

*1 仕様は、予告無く変更されることがございます。ご了承ください。
 *2 対照をひとつ含む場合。
 *3 T1：コントロールライン。試料が正常に展開したことの指標。試料中の抗原の有無に関わらず発色。
 T2：テストライン。試料中の抗原の有無の指標。抗原濃度が高いほど、ラインの色が濃くなる。

Webでのお申込はこちらから

itea イムノクロマト 検索

http://www.itea.jp/product_item/cd_20001/



本製品に関するお問い合わせ先


ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所
 事業部門 試薬課 Mail : reag-info@itea.jp
 TEL : 03-3526-2031
 FAX : 03-3526-2032

関連製品は次ページ →

試験・測定受託サービスもおこなっています

ITEAでは、アレルゲン及び化学物質の定量・可視化の技術により、製品評価、試料や環境中のアレルゲン測定を受託サービスを行っています。製品開発から販売までの各段階に応じて、最適な試験をご提案します。詳細は右記のWebページをごらんください。

詳しい情報ははこちらから
<http://www.itea.jp/trustee/>



関連製品

ダニアレルゲンELISA キット

製品のより詳しい情報はこちらから
<http://www.itea.jp/product/elisa/>



迅速! 反応時間 2時間 15分 ~	検出限界 31.2 pg/ml ~	主要アレルゲンを特異的に検出!	蛍光リーダ-不要!	室温で測定可能!
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------	-----------------

◆キット内容

- 抗体固相化96ウェルプレート
- 標準液 (凍結乾燥) 4測定分
- 酵素標識抗体*4
- 酵素標識ストレプトアビジン*5
- 発色基質液 (TMB)
- 反応停止液 (1N硫酸)
- 検体希釈液
- 洗浄液 (10倍濃縮液)*6
- マイクロプレート用シール
- 取扱説明書、SDS



◆測定範囲

#10205、#10206 : 30, 15, 7.5, 3.75, 1.88, 0.94, 0.47 ng/mL
 #10207 : 2000、1000、500、250、125、62.5、31.2 pg/ml

製品コード	製品名	包装	価格 ¥ (税抜)
10205	ITEA ダニアレルゲン (Der f 1) ELISA キット (抗体固相化済)	96ウェル	40,000
10206	ITEA ダニアレルゲン (Der p 1) ELISA キット (抗体固相化済)	96ウェル	40,000
10207	ITEA ダニアレルゲン (Der f 1) 高感度ELISAキット (抗体固相化済)	96ウェル	80,000

*4 #10207 ITEA ダニアレルゲン (Der f 1) 高感度ELISAキットのみ、ビオチン標識抗Der f 1抗体。
 *5 #10207 ITEA ダニアレルゲン (Der f 1) 高感度ELISAキットのみ。
 *6 #10207 ITEA ダニアレルゲン (Der f 1) 高感度ELISAキットのみ、20倍濃縮液。

ダニアレルゲン抽出物

製品のより詳しい情報はこちらから
<http://www.itea.jp/product/allergen/>



製品コード	製品名	規格	価格 ¥ (税抜)
10101	ダニ (Dp) 培地抽出物*7	Der p 1 量として 10 µg	13,000
10102	ダニ (Df) 培地抽出物*7	Der f 1 量として 10 µg	13,000
10106	ダニ (Dp) 虫体抽出物*8	総タンパク質量として 5 mg	26,000
10107	ダニ (Df) 虫体抽出物*8	総タンパク質量として 5 mg	26,000



*7 培地抽出物：生育培地（飼料及び排泄物を含む）からの抽出物
 *8 虫体抽出物：ダニ虫体からの抽出物

製品コード	製品名	規格	価格 ¥ (税抜)
10108	ダニ(Df)抽出物(免疫用)	総タンパク質量として 1 mg	40,000



そのほか、花粉、ペット、カビなど、多数のアレルゲン関連製品をとりそろえております。

特注品も承っておりますので
 ぜひお気軽にお問い合わせください!



製品カタログのダウンロードはこちらから

itea 製品情報 検索

<http://www.itea.jp/product/>

無償サンプルをご提供いたします。
 お気軽にお申し込み下さい。



本製品に関するお問い合わせ先



ITEA株式会社
 東京環境アレルギー研究所

事業部門 試薬課

Mail : reag-info@itea.jp
 TEL : 03-3526-2031
 FAX : 03-3526-2032